

ARTICULATEURS


CANDULOR.

Nous comprenons
les prothèses dentaires
depuis 1936.

Articulateurs pour les prothèses totales, partielles et hybrides ainsi que pour les prothèses implantaires.

Pocket Portfolio

Le Pocket Portfolio CANDULOR offre un aperçu compact et simple des articulateurs, de leurs particularités et utilisation.

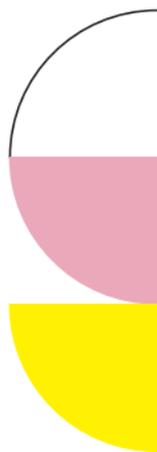

ARTICULATEURS



CA 3.0

CA 3.0 LARGE

 **Matériau** Aluminium anodisé

 **Propriété** Permet une simulation de mouvements simples et physiologiques

 **Caractéristiques techniques**

- Triangle de Bonwill : 110 mm
- Angle de Balkwill : 25°
- Voie de rétrusion : 1,5 mm
- Immediate Side Shift : 0 – 2,5 mm fixe
- Réglage de la pente condylienne de 0° – 60°
- Les articulateurs CA 3.0 et CA 3.0 LARGE présentent des hauteurs différentes.

Avantages




Haute précision assurée par une simulation réaliste de l'articulation temporo-mandibulaire et un profil biconique permettant de créer un degré de liberté occlusal.



Polyvalent car adapté à toutes les prothèses et toutes les techniques de montage courantes. Combiné avec nos dents postérieures Condyliform II NFC⁺, il est idéal pour la technique de montage Gerber.



L'auxiliaire précis d'installation et d'orientation avec encoche de guidage intégrée permet d'aligner l'élastique, l'indicateur du point incisal et le plan occlusal.

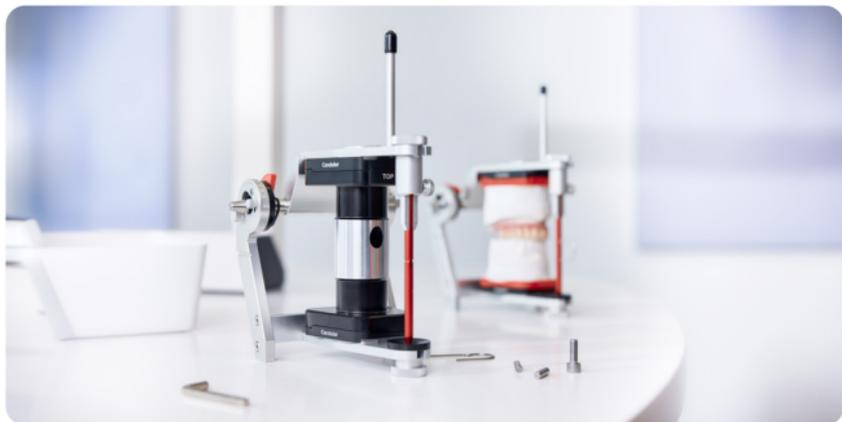

Utilisation facile grâce au système Split Cast.

Modèles de mouvement



Mouvement de protusion



Mouvement latéral et de Bennett



Déplacement immediate side shift (ISS)



Voie de rétrusion

Accessoires



1. Adaptateur d'arc facial

Pour l'utilisation d'autres arcs faciaux avec les articulateurs CANDULOR

2. Adaptateur Support d'arc facial CA 3.0 LARGE

3. Support d'arc facial

4. Porte-instruments avec table de transfert plate

(pour plaques d'articulation Candulor)

5. Support d'instruments pour Splitex®

(pour plaques d'articulation Splitex®)

CANDULOR. HIGH END ONLY.

ÉTALONNAGE



Grâce à l'accessoire d'étalonnage, CA 3.0 LARGE est ajusté en hauteur à 126 mm et peut être calibré avec les articulateurs Artex®*.

*compatible avec Artex BN, Artex CN, Artex CT, Artex CPR, Artex CR;
Splitex® et Artex® sont des marques déposées d'Amann Girrbach GmbH,
75177 Pforzheim, DE

Du laboratoire ...



- Pour un flux dentaire plus efficace et économique.

... au cabinet dentaire



- Les processus de travail sont simplifiés : dans le flux dentaire, des modèles peuvent circuler entre le laboratoire et le cabinet sans articulateur.
- Moins de sources d'erreur : l'étalonnage des articulateurs permet d'éviter des erreurs lors du transfert.

Calibration facile



Les articulateurs sont parfaitement calibrés



- Les irrégularités d'ajustement sont visualisées simplement avec la clé de centrage fractionnée

Accessoires pour la calibration



1. Plaques d'articulation pour Splitex®
2. Clé de centrage compatible avec Splitex®
3. Plaques d'articulation plastique pour Splitex®
4. Plaques d'adhésion pour plaques d'articulation Splitex® (Ø 35 mm)

Envie d'essayer ?
Nous vous conseillons
volontiers.

Candolor Dental GmbH

Am Riederngraben 6

D-78239 Rielasingen-Worblingen

T +49 (0) 7731 79783-0

F +49 (0) 7731 28917

E info@candolor.de

W candolor.com

