

# REGISTRIERUNG


# CANDULOR.

## Wir verstehen Prothetik seit 1936.


Registriersets für die Totalprothetik,  
Teil- und Hybridprothetik sowie  
Implantatprothetik.

### Pocket Portfolio

Das CANDULOR Pocket Portfolio bietet Ihnen eine  
kompakte und einfache Übersicht über die Registriersets  
und deren Besonderheiten.

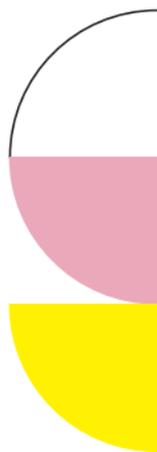

# CRS SET 10

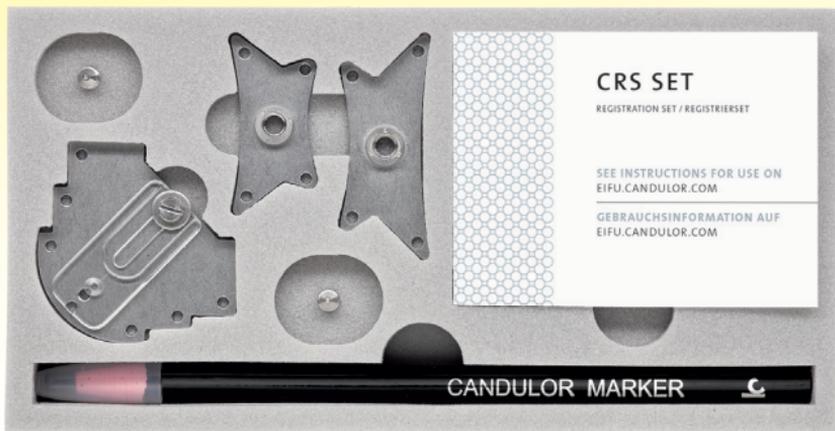

Das CRS Set 10 dient der Kieferrelationsbestimmung bei totaler Zahnlosigkeit (nach McGrane). Dank breiter Platten lässt sich das Set leicht auf den unbezahnten Kiefer positionieren.

-  **Material** Rostfreier Edelstahl 1.4305, 1.4301 und PC
-  **Eigenschaft** Set zur intraoralen Pfeilwinkel-Registrierung für die Totalprothetik
-  **Ziel** Aufzeichnung der Lage des Unterkiefers zum Oberkiefer, um die Kondylen zentrisch, seitengleich und nicht verschoben in den beiden Gelenkgruben zu positionieren.
-  **Einsatz** unbezahnt

# CRS SET 15



Das CRS Set 15 ist ein intraorales Stützstiftregistrat zur individuellen Bestimmung der zentrischen Kieferposition bei bezahnten und teilbezahnten Kiefern und zur Nachkontrolle von Totalprothesen (nach McGrane).

- |   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 🧪 | <b>Material</b>    | Rostfreier Edelstahl 1.4305, 1.4301 und PC  |
| 🌀 | <b>Eigenschaft</b> | Set zur intraoralen Pfeilwinkel-Registrierung für bezahnte oder teilbezahnte Kiefer |
| 📏 | <b>Ziel</b>        | einen physiologischen Ausgangspunkt (Zentrik) bestimmen                             |
| 📦 | <b>Einsatz</b>     | bezahnt und teilbezahnt   |


# CRS SET 20



Das CRS Set 20 dient zur Nachkontrolle von Totalprothesen und zur einfachen Kieferrelationsbestimmung bezahnter sowie teilbezahnter Kiefer mittels langsamen und ballistischen Schliessbewegung auf ein frontales Plateau.

-  **Material** Rostfreier Edelstahl 1.4305, 1.4301
-  **Eigenschaft** Set für ein Registrierverfahren mittels Auf- und Schliessbewegungen
-  **Ziel** Unterstützung einer kranioventralen Orientierung der Kondylen in der Fossa (entspricht der idealisierten Vorstellungen der physiologischen Kondylenposition)
-  **Einsatz** bezahnt und teilbezahnt

# CRS SET 10

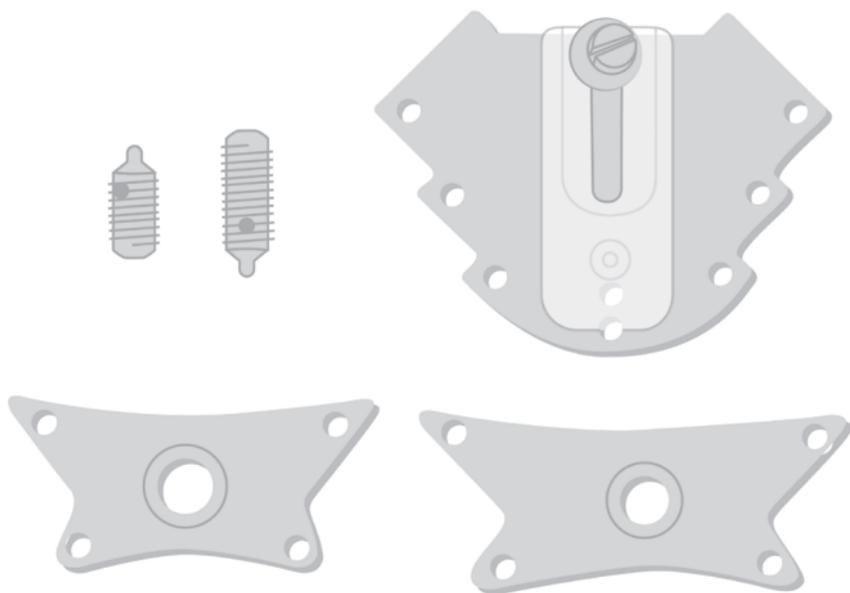

## Lieferumfang

- 1 Registrierspitze kurz
- 1 Registrierspitze lang
- 1 Registrierplatte
- 1 Stützstiftplatte klein
- 1 Stützstiftplatte gross
- 6 Schrauben und Unterlegscheiben zur Registrierplatte
- 6 Plexiglasplatten
- 1 CANDULOR Marker

# CRS SET 15



## Lieferumfang

- 1 Registrierplatte 1
- 1 Registrierplatte 2
- 1 Registrierplatte 3
- 1 Registrierplatte 4
- 1 Stützstiftplatte
- 1 Registrierspitze mit Hülse kurz
- 1 Registrierspitze mit Hülse lang
- 6 Plexiglasrondellen
- 1 CANDULOR Marker

# CRS SET 20



## Lieferumfang

- 2 Registrierplatten klein
- 2 Registrierplatten gross
- 1 Registrierspitze mit Hülse kurz
- 1 Registrierspitze mit Hülse lang
- 1 CANDULOR Marker

Mal ausprobieren?  
Wir beraten Sie gerne.

**Candolor Dental GmbH**

Am Riedergraben 6

D-78239 Rielasingen-Worblingen

**T** +49 (0) 7731 79783-0

**F** +49 (0) 7731 28917

**E** [info@candolor.de](mailto:info@candolor.de)

**W** [candolor.com](http://candolor.com)



**CANDULOR. HIGH END ONLY.**

763347/de/2024-01-25