

REGISTRO

CANDULOR.

Nosotros entendemos
la odontología protésica
desde 1936.


Sets de registro para las prótesis
totales, las prótesis parciales e
híbridas y las prótesis con implantes.

Pocket Portfolio

El Pocket Portfolio de CANDULOR le ofrece una
visión general compacta y sencilla de los sets de
registro y sus particularidades.



CRS SET 10

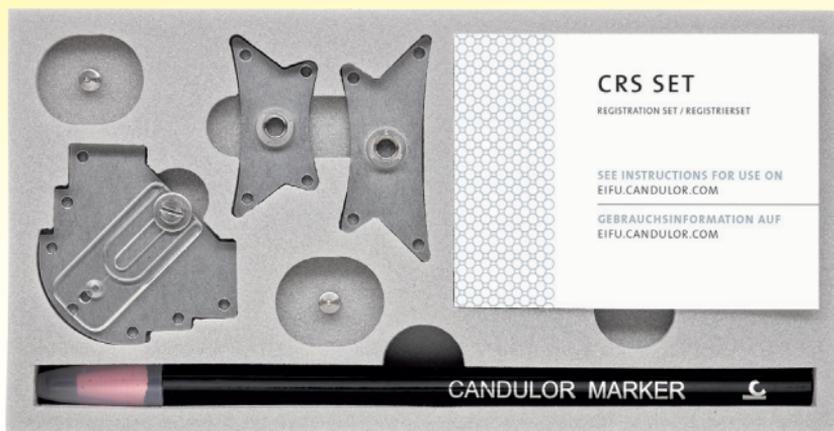

El CRS Set 10 sirve para la determinación de la relación intermaxilar en casos de edentulismo total (según McGrane). Gracias a las placas más anchas es posible colocar fácilmente el set sobre la mandíbula edéntula.

-  **Material** Acero noble inoxidable 1.4305, 1.4301 y PC
-  **Propiedad** Set para el registro intraoral del arco gótico en prótesis totales
-  **Objetivo** Registro de la posición de la mandíbula respecto al maxilar para colocar los cóndilos centrados, equilaterales y sin desplazamiento en ambas cavidades articulares.
-  **Aplicación** Edéntulo

CRS SET 15



El CRS Set 15 es un registro intraoral con perno de soporte para determinar de manera individualizada la posición céntrica de mandíbulas dentadas o parcialmente edéntulas y para el seguimiento de las prótesis totales (según McGrane).

-  **Material** Acero noble inoxidable 1.4305, 1.4301 y PC
-  **Propiedad** Set para el registro intraoral del arco gótico en el maxilar inferior dentado o parcialmente edéntulo
-  **Objetivo** Determinar un punto de inicio fisiológico (céntrica)
-  **Aplicación** Dentado y parcialmente edéntulo


CRS SET 20



El CRS Set 20 se emplea para el seguimiento de prótesis totales y para determinar de manera fácil la relación mandibular en mandíbulas dentadas y parcialmente edéntulas mediante un movimiento de oclusión lento y balístico en una placa frontal.

-  **Material** Acero noble inoxidable 1.4305, 1.4301
-  **Propiedad** Set para un proceso de registro mediante movimientos de apertura y cierre
-  **Objetivo** Favorecer una orientación craneoventral de los cóndilos en la fosa (corresponde a los conceptos idealizados de la posición fisiológica de los cóndilos)
-  **Aplicación** Dentado y parcialmente edéntulo

CRS SET 10

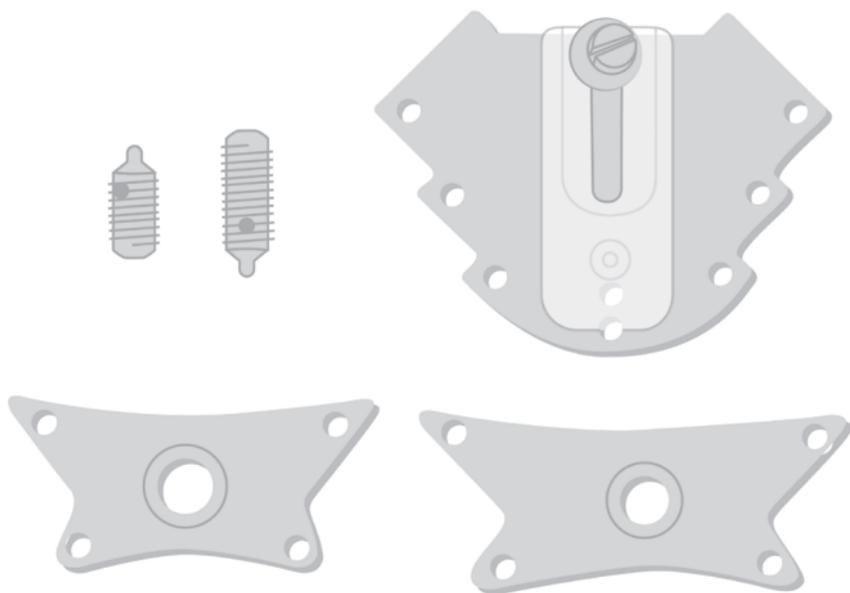

Forma de entrega

- 1 Punta de registro corta
- 1 Punta de registro larga
- 1 Placa de registro
- 1 Placa con perno de soporte pequeña
- 1 Placa con perno de soporte grande
- 6 Tornillos y arandelas para la placa de registro
- 6 Placas de plexiglás
- 1 CANDULOR Marker

CRS SET 15



Forma de entrega

- 1 Placa de registro 1
- 1 Placa de registro 2
- 1 Placa de registro 3
- 1 Placa de registro 4
- 1 Placa con perno de soporte
- 1 Punta de registro con funda corta
- 1 Punta de registro con funda larga
- 6 Discos de plexiglás
- 1 CANDULOR Marker

CRS SET 20



Forma de entrega

- 2 Placas de registro pequeñas
- 2 Placas de registro grandes
- 1 Punta de registro con funda corta
- 1 Punta de registro con funda larga
- 1 CANDULOR Marker

¿Quiere probarlos?
Será un placer asesorarle.

Candulor Dental GmbH

Am Riedergraben 6

D-78239 Rielasingen-Worblingen

T +49 (0) 7731 79783-0

F +49 (0) 7731 28917

E info@candulor.de

W candulor.com



CANDULOR. HIGH END ONLY.

763352/es/2024-01-25

