

REGISTRAZIONE

CANDULOR.

Capiamo il mondo della tecnica protesica dal 1936.


Set di registrazione per protesi totali,
parziali, ibride e impianti.

Pocket Portfolio

Il Pocket Portfolio CANDULOR offre una panoramica
semplice e compatta dei set di registrazione e delle
relative caratteristiche particolari.



CRS SET 10

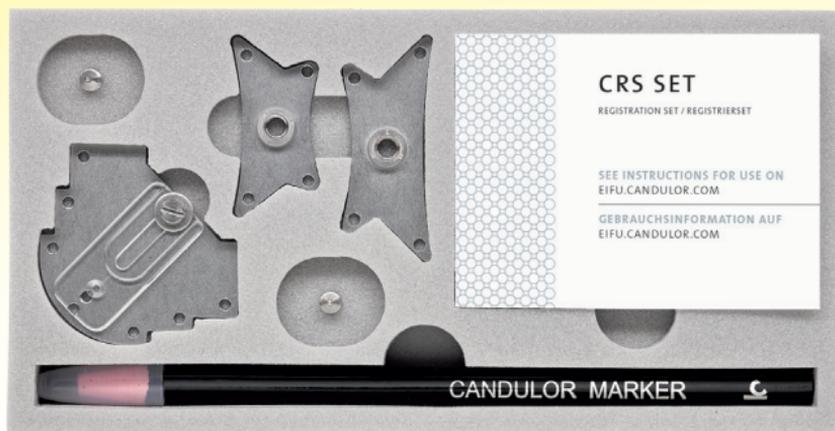

Il CRS Set 10 serve per la determinazione della relazione intermascellare in edentulia totale (secondo McGrane). Grazie alle piastre larghe, il set può essere facilmente posizionato sulla mascella edentula.

-  **Materiale** Acciaio inossidabile 1.4305, 1.4301 e PC
-  **Funzione** Set per la registrazione intraorale con arco gotico per protesi totali
-  **Obiettivo** Registrazione della posizione della mascella inferiore rispetto alla mascella superiore, al fine di posizionare i due condili centralmente, allineati lateralmente e non spostati nelle due fosse articolari.
-  **Inserimento** Edentulo

CRS SET 15



Il CRS Set 15 è un dispositivo di registrazione intraorale con perno di appoggio per la determinazione individuale della posizione centrica in mascellari completi e parzialmente edentuli per il follow-up di protesi complete (secondo McGrane).

-  **Materiale** Acciaio inossidabile 1.4305, 1.4301 e PC
-  **Funzione** Set per la registrazione intraorale con arco gotico per mascellari completi o parzialmente edentuli
-  **Obiettivo** Determinazione di un punto di partenza fisiologico (centratura)
-  **Inserimento** Dentato e parzialmente senza denti


CRS SET 20



Il CRS Set 20 è studiato per il controllo successivo di protesi totali e per una facile determinazione della relazione inter-mascellare di mascellari completi e parzialmente edentuli attraverso un movimento di chiusura lento e balistico su una piastra frontale.

-  **Materiale** Acciaio inossidabile 1.4305, 1.4301
-  **Funzione** Set per la registrazione mediante movimenti di apertura e chiusura
-  **Obiettivo** Supporto di un orientamento cranioventrale dei condili nella fossa (corrisponde a una concezione idealizzata della posizione dei condili fisiologica)
-  **Inserimento** Dentato e parzialmente senza denti

CRS SET 10

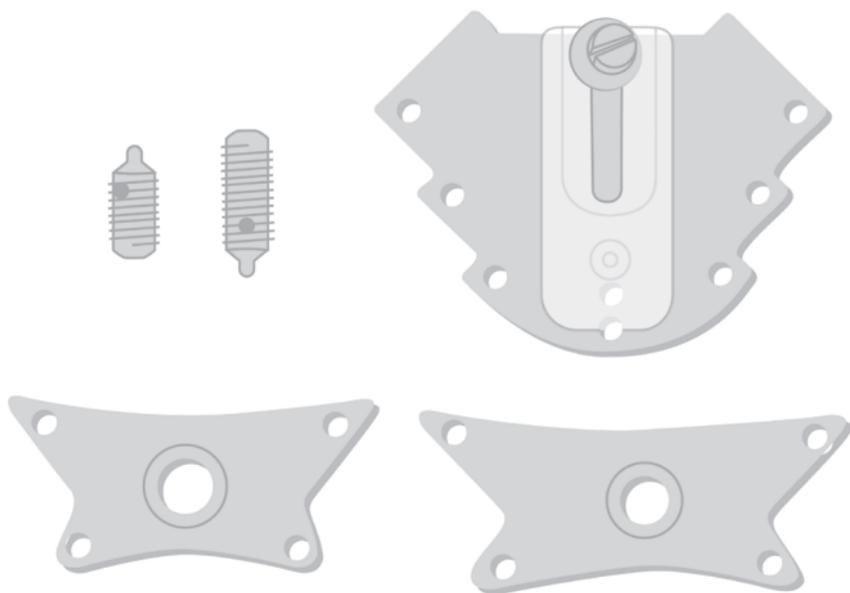

Contenuto

- 1 Perno di appoggio corto
- 1 Perno di appoggio lungo
- 1 Piastra di registrazione
- 1 Piastra per perno di appoggio piccola
- 1 Piastra per perno di appoggio grande
- 6 Viti e rondelle per la piastra di registrazione
- 6 Placchette in plexiglas
- 1 CANDULOR Marker

CRS SET 15



Contenuto

- 1 Piastra di registrazione 1
- 1 Piastra di registrazione 2
- 1 Piastra di registrazione 3
- 1 Piastra di registrazione 4
- 1 Piastra per perno di appoggio
- 1 Perno di appoggio con boccola filettata corto
- 1 Perno di appoggio con boccola filettata lungo
- 6 Rondelle in plexiglas
- 1 CANDULOR Marker

CRS SET 20



Contenuto

- 2 Piastre di registrazione piccole
- 2 Piastre di registrazione grandi
- 1 Perno di appoggio con boccola filettata corto
- 1 Perno di appoggio con boccola filettata lungo
- 1 CANDULOR Marker

Volete provare?
Saremo lieti di consigliarvi.

Candolor Dental GmbH

Am Riedergraben 6


D-78239 Rielasingen-Worblingen

T +49 (0) 7731 79783-0

F +49 (0) 7731 28917

E info@candolor.de

W candolor.com

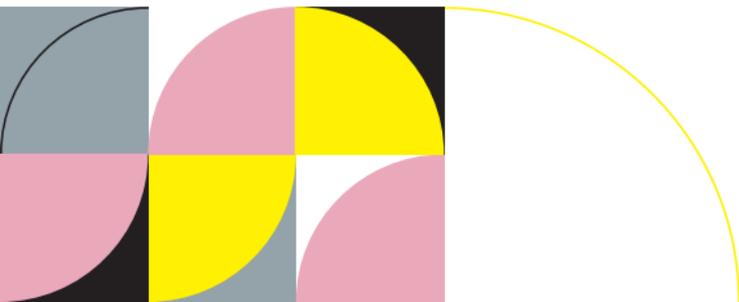

CANDULOR. HIGH END ONLY.